



Para que Labim pueda enviar emails a través de su cuenta de Gmail, es necesario que genere una contraseña de aplicación para mantener en secreto su verdadero password de correo.

NOTA: La generación del password de aplicación debe realizarlo desde la pc Principal de Labim.


- 1- Ingrese a la configuración de su cuenta de google mediante el siguiente link:
<https://myaccount.google.com/>
- 2- Presione en su imagen de cuenta para desplegar la lista de opciones y elija la opción **Gestionar tu cuenta de Google**

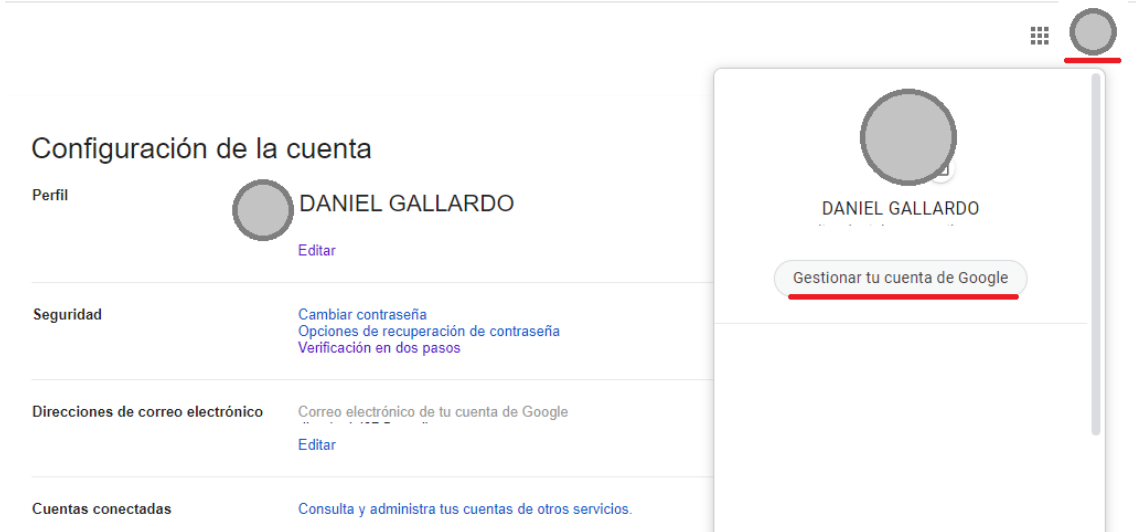


- 3- En el menú de la izquierda elija la opción **Seguridad**.

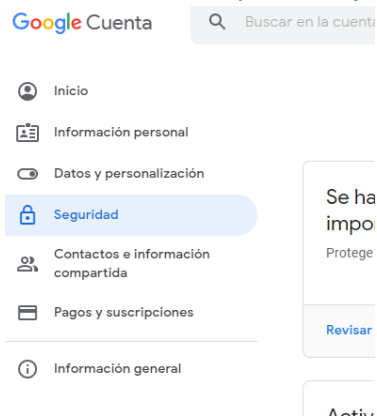

- 4- En las opciones centrales busque el grupo Iniciar sesión en Google y luego verifique que tenga activada la opción de **Verificación en 2 pasos**:

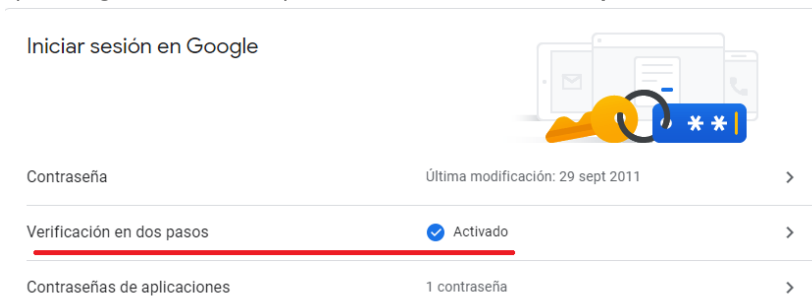

- 5- Si no se encuentra activado, haga click para activar la verificación en dos pasos y siga las instrucciones indicadas por Google.
- 6- Una vez activada la verificación en dos pasos, haga click en la opción **Contraseñas de aplicaciones**

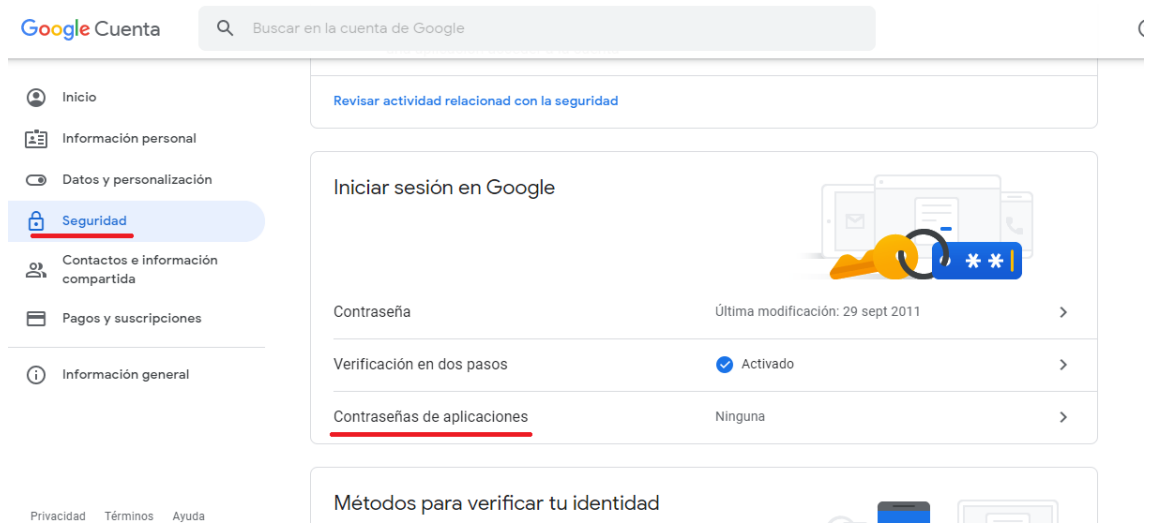

- 7- Elija la opción **Correo y Ordenador con Windows** y presione el botón **generar**
- ← Contraseñas de aplicaciones

Las contraseñas de aplicación te permiten iniciar sesión en tu cuenta de Google desde aplicaciones instaladas en dispositivos que no admiten la verificación en dos pasos. No tendrás que recordarlas porque solo tienes que introducirlas una vez. [Más información](#)

No tienes ninguna contraseña de aplicación.

Selecciona la aplicación y el dispositivo para los que quieres generar la contraseña de aplicación.

Correo ▼ Ordenador con Windows ▼

GENERAR

- 8- Google generará una contraseña para que el equipo actual pueda enviar emails. Copie la contraseña generada y úsela como password de cuenta en Labim. **Importante: los espacios NO forman parte del password**

Contraseña de aplicación generada

The screenshot shows the Google account setup process. On the left, a form titled "Add your Google account" asks for an email address (seuresally@gmail.com) and a password. On the right, the generated application password "clhy ggwk plhd" is displayed in a yellow box. Below it, instructions explain how to use the password: 1. Open the Mail app, 2. Open the Settings menu, 3. Select Accounts and then your Google account, 4. Replace your current password with the 16-character password shown above. A "LISTO" button is visible at the bottom right.

- 9- _____
- 10- Acceda a Labim para configurar el envío de emails: en pantalla principal ir al menú **Configurar** y luego a **Envío Informes Resultados**



- 11- Active la opción de envío, elija la opción Gmail, ingrese su dirección de correo desde la cual se enviaran los emails con los informes a pacientes y en el campo password ingrese el nuevo password generado anteriormente por Google. **NO incluir los espacios en el password**

← Configuración: Envíos de informes automático

✉ Configuración envío de Informes de resultados

📄 GUARDAR TODO

LABORATORIOS

Laboratorio

LABORATORIO

✉ Por EMAIL

Habilitado

Servidor de correo

GMail Hotmail Otro

Usuario

usuario@ gmail.com

Password

.....

Probar configuración

Enviar email de prueba a:

destino@prueba.com

probar envío

12-

- 13- Por ultimo presione el botón probar envío para verificar que la configuración sea correcta.

